



ディスプレイザブル採卵針 “動物用”


cow ova vacuuming needle... **COVA Needle**

<牛用-超音波ガイド・生体卵子吸引(OPU)専用ディスプレイザブル針セット>



針先・ブラスト加工

- 適応する超音波プローブ
アロカ、本多電子、日立、その他
- 包装：1本ずつの個別包装
- 梱包単位：20本/箱

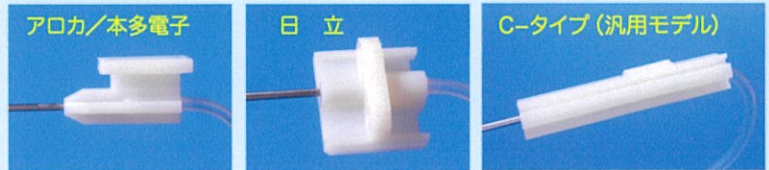



◎ Cova Needle/ディスプレイザブル化した採卵針は...

- 国内各メーカー及び海外の超音波プローブの形状、寸法に対応しました。
アロカ/17Gx500mm, 本多電子/17Gx490mm, 日立/17Gx540mm, 汎用C-タイプ/17Gx600mm
- One-way タイプです。
- チューブは医療用塩ビチューブ(長さ1500mm)を使用。
- 針管・つまみ・チューブが一体化されていますから、自分で組み立てる手間がありません。
- エチレンオキサイドガス滅菌済みで、開封後すぐに使用できます。
- 1回のみでの使用です。再洗浄の手間とコストから解放されます。

◎ さらに...

- 針の先端までブラスト加工を施し、針先がモニター画面の反射像に一致するようにしました。
- チューブとつまみは接着されていますので、作業中に抜けることはありません。
- 注射針用のシリコンを針先に塗布、**穿刺抵抗を大幅に低減しました**。針の微妙な操作が楽です。

穿刺抵抗の比較 (自社内 ゴム板穿刺テスト)

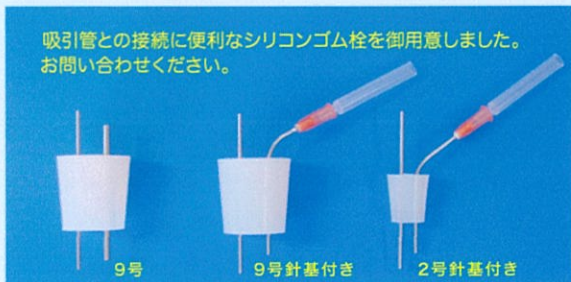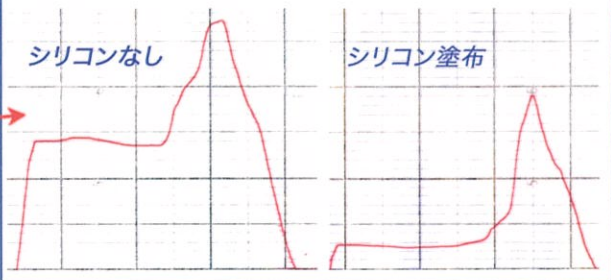

吸引管との接続に便利なシリコンゴム栓を御用意しました。お問い合わせください。

使用上の注意

- ディスposable製品であるので、一回使用に限ること
- 包装が破損しているもの、汚れているものは使用しないこと
- 高温多湿を避け、直射日光や水濡れに注意して保管すること

製造/販売元 **ミサワ医科工業株式会社** 営業担当:加藤、岡井

〒309-1717 茨城県笠間市旭町351 Tel : 0296-77-8649 Fax : 0296-77-8849
E-mail : information@misawa-medical.co.jp URL : http://www.misawa-medical.co.jp